

機械器具 (32) 医療用吸引器 管理医療機器

一般的名称：歯科用吸引装置 JMDN コード：34859000

フラミング

【警告】

- ※※ ① 本機に外部から力を加えるような衝撃を与えないこと。
- ※※ ② 発火性のある金属や水、有機溶剤、火気類等は絶対に吸引させないこと。
- ※※ ③ 一方向のみの回転での使用は、絶対にしないこと。
- ※※ ④ 使用目的以外の目的で使用しないこと。


【禁忌・禁止】

- ※※ ① 吸引フードを外しての使用。
- ※※ ② 機器の改造。
- ※※ ③ 不具合状態での使用。


【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

床固定式

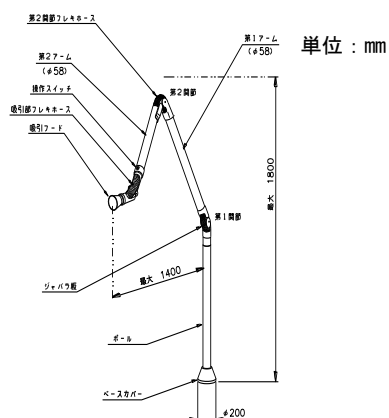

天吊式

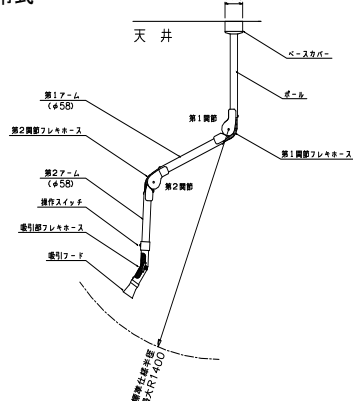

〈電気的定格〉

定格電圧 : AC24V (スイッチ)
 定格電流 : 0.3 A
 定格周波数 : 50/60 Hz

〈機器の分類〉

電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器 (☒)
 電撃に対する保護の程度：B形装着部 (☒)

〈原理〉

本機と吸引装置ポンプとを配管及び操作線接続します。本機のスイッチ (ON・OFF) で吸引装置ポンプが作動し、本機吸引フードから吸引する。

【使用目的又は効果】

歯科治療中の患者の口腔から飛散する飛沫粉塵を患者の口元で吸引除去する装置

【操作方法又は使用方法】

1. 取付・設置は専門の担当者が行います。
2. 操作方法、使用方法
 詳細は、取扱説明書をご参照下さい。
 (1) 吸引フードを患者の口元付近に移動する。
 (2) 操作スイッチをONにする。
 (3) 口腔外吸引が開始する。
 (4) 治療終了後、操作スイッチをOFFにする。
 (5) 口腔外吸引が停止する。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外の目的で使用しないこと
2. 製品に破損等の異常がある場合には使用しないこと
3. 使用後は、速やかに汚れを除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること
4. 必要以上に応力や衝撃をかけないこと
5. 機器は、分解・改造等しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

※※〈保管方法〉

1. 水の掛からない場所に保管すること。
2. 気圧、風通し、日光、埃、鉄分、硫黄分等を含んだ空気等により、悪影響が無い場所に保管すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

〈耐用年数〉

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り5年間とする。

【保守点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

1. 吸引フードの消毒洗浄
2. 各関節の締め付け調整
 吸引フードを取外す時は、手袋を必ず着用すること。

〈業者に委託する保守点検事項〉

1. 固定状態
2. 各部の調整・締め付け
3. 機器及び操作線の接続
4. 消耗部品は、取扱説明書をご参照して頂き、交換時期、消耗度合により交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〈製造販売業者〉

名称：株式会社アクロス
 ※住所：〒480-1115 愛知県長久手市菖蒲池 1121
 TEL：0561-62-8001

〈製造業者〉

名称：株式会社アクロス
 ※住所：〒480-1115 愛知県長久手市菖蒲池 1121
 TEL：0561-62-8001

取扱説明書を必ずご参照下さい。